


# Modell UF V 700 | Ultratiefkühlschränke mit klimaneutralen Kältemitteln


Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -90 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.

## VORTEILE

- Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse.
- Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170.
- Wärmedämmung mit einzigartigen Long-life VIPs (Vakuumdämmplatten).
- Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl

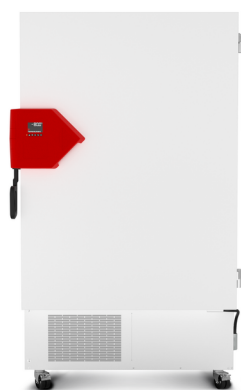

Modell 700

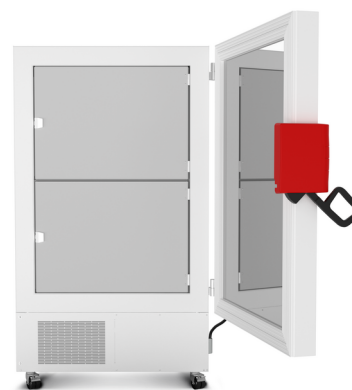

Modell 700

## WICHTIGE MERKMALE

- Temperaturbereich: -90 °C bis -40 °C
- Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
- Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- Wärmedämmung mit einzigartigen Long-life VIPs (Vakuumdämmplatten)
- Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung
- Ergonomischer Türverschlusshebel
- Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
- Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
- 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
- Wasserkühlung (variantenabhängig)
- Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Ethernet-Schnittstelle
- 3 Durchführungen Ø 28 mm, hinten

## BESTELLINFORMATIONEN

Innenraumvolumen [L]	Netzanschluss – Gerätesicherung	Netzstecker*	Ausführung	Modellvariante	Art.-Nr.
736	230 V 1~ 50 Hz -10,0 A	CEE 7/7	Standard	UFV700-230V	9020-0348
			Wasserkühlung	UFV700-230V-W	9020-0350
	115 V 1~ 60 Hz -15,0 A	NEMA 5-15	Standard	UFV700UL-120V	9020-0352
	208...230 V 2~ 60 Hz -10,0 A	NEMA 6-15	Standard	UFV700UL-240V	9020-0354


## TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten				
Bezeichnung	UFV700-230V	UFV700-230V-W	UFV700UL-240V	UFV700UL-120V
Artikelnummer	9020-0348	9020-0350	9020-0354	9020-0352
Ausführung	Standard	Wasserkühlung	Standard	Standard
Leistungsdaten Temperatur				
Temperaturbereich	-90...-40 °C	-90...-40 °C	-90...-40 °C	-90...-40 °C
Räumliche Temperaturabweichung bei -80 °C	2,5 ± K	2,5 ± K	2,5 ± K	2,5 ± K
Zeitliche Temperaturabweichung bei -80 °C	1,5 ± K	1,5 ± K	1,5 ± K	1,5 ± K
Abkühlzeit von 22 °C auf -80 °C	450 min	450 min	450 min	450 min
Elektrische Daten				
Nennspannung	230 V	230 V	208...230 V	115 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Nennleistung	1,6 kW	1,6 kW	1,8 kW	1,4 kW
Gerätesicherung	10,0 A	10,0 A	10,0 A	15,0 A
Phase (Nennspannung)	1~	1~	2~	1~
Maße und Gewichte				
Innenraumvolumen	736 L	736 L	736 L	736 L
Gerätgewicht netto (leer)	288 kg	288 kg	288 kg	288 kg
Maximale Gesamtbelastung	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Wandabstand hinten	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Wandabstand seitlich	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Gehäuseabmessungen ohne Anbauten und Anschlüsse				
Breite netto	1.110 mm	1.110 mm	1.110 mm	1.110 mm
Höhe netto	1.966 mm	1.966 mm	1.966 mm	1.966 mm
Tiefe netto	938 mm	938 mm	938 mm	938 mm
Innenabmessungen				
Innenraum Breite	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm
Innenraum Höhe	1.300 mm	1.300 mm	1.300 mm	1.300 mm
Innenraum Tiefe	636 mm	636 mm	636 mm	636 mm

Innentüren	2	2	2	2
Außentüren	1	1	1	1
<b>Umweltrelevante Daten</b>				
Schalldruckpegel	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Energieverbrauch bei Sollwert -80 °C und T <sub>u</sub> = 20 °C	8,1 kWh/d	8,1 kWh/d	8,1 kWh/d	8,1 kWh/d
<b>Einbauten</b>				
Anzahl Einschübe (Std./max.)	3/11	3/11	3/11	3/11
<b>Beladungsvarianten</b>				
Gestelle pro Einschubebene	6	6	6	6
Kryoboxen 50 mm	528	528	528	528


Sämtliche technischen Daten gelten ausschließlich für unbeladene Geräte in Standardausführung bei einer Umgebungstemperatur von 22 ±3 °C und einer Netzspannungsschwankung von ±10 %. Die Temperaturdaten sind nach BINDER Werksnorm und in Anlehnung an DIN 12880:2007 ermittelt und orientieren sich an den empfohlenen Wandabständen von 10 % der Höhe, Breite und Tiefe des Innenraums. Alle Angaben sind für Seriengeräte typische Mittelwerte. Technische Änderungen sind vorbehalten.

### ABMESSUNGEN inkl. Anbauten und Anschlüssen [mm]

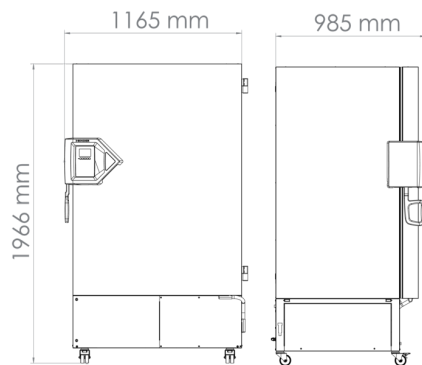

DIAGRAMME


**Auftauzeit nach Stromausfall**

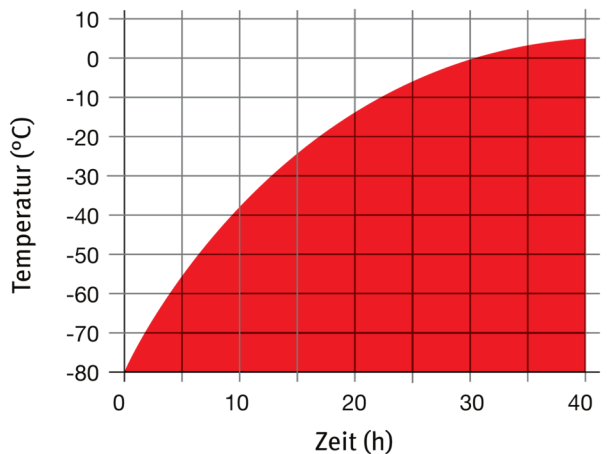

Umgebungstemperatur 22 °C, ohne Beladung

Aufheizkurve

**Abkühlzeit**

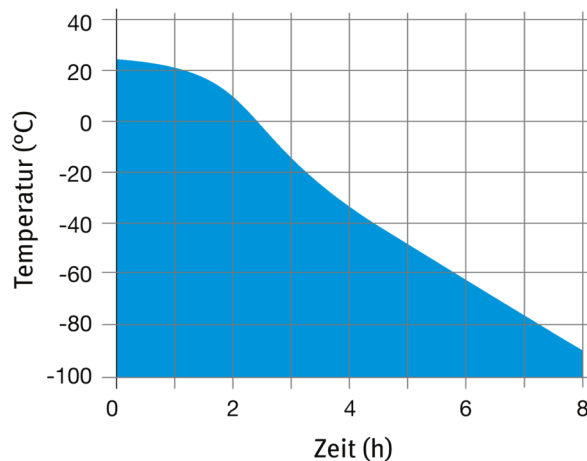

Umgebungstemperatur 22 °C, ohne Beladung

Abkühlkurve

OPTIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	UFV 700	*	Art.-Nr.
Alarmsystem, batteriegepuffert	zur Aufrechterhaltung von Temperaturanzeige, Alarmmeldungen und Kommunikation	•	-	8012-1910
Analogausgang 4-20 mA	für Temperaturwerte (Ausgang nicht justierbar)	•	-	8012-1898
Buck-Boost-Converter	automatischer Spannungsausgleich	•	-	8012-1897
CO <sub>2</sub> -Notkühlung	werksseitig montiert (vergrößerte Tiefe des UF V beachten: 1085 mm), beinhaltet die Option batteriegepuffertes Alarmsystem	•	-	8012-1936
Kalibrierzertifikat, Erweiterung	für Temperatur, zur Erweiterung der Messung in Nutzraummitte um eine weitere Prüftemperatur	•	-	8012-1126
	Messung in Nutzraummitte bei vorgegebener Prüftemperatur	•	-	8012-0031
Kalibrierzertifikat Temperatur	Räumliche Temperaturmessung inklusive Zertifikat, 20 Messpunkte bei einer vorgegebenen Prüftemperatur	•	-	8012-0925
Kompartimenttüren	Ausgeschäumte Kompartimenttüren mit Dichtung	•	-	8012-1894
Schalterabdeckung	Abschließbare Hauptschalterabdeckung	•	-	8012-1980
Tür-Zugangssystem	bestehend aus elektromechanischem Türverschluss und elektronischer Zugangskontrolle via NumPad	•	-	8012-1899
Türschloss	abschließbarer Türgriff	•	-	8012-1911
Versandpalette	mit Entladerampe zur Aufstellung des Gerätes ohne Stapler	•	-	8012-1907

## ZUBEHÖR

Bezeichnung	Beschreibung	UFV 700	*	Art.-Nr.
Abtaukit	bestehend aus Ablaufwanne, Wischer und Eiskratzer	•	-	8012-1909
APT-COM™ 4 BASIC-Edition	für einfache Anforderungen an Aufzeichnung und Dokumentation mit bis zu 5 vernetzten Geräten.			
	Version 4, BASIC Edition	•	-	9053-0039
APT-COM™ 4 GLP-Edition	für die Arbeit nach GLP-konformen Bedingungen. Die Dokumentation der Messwerte erfolgt gemäß den Anforderungen der FDA-Richtlinien 21CFR11 manipulationssicher.			
	Version 4, GLP-Edition	•	-	9053-0042
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	komfortable Geräte- und Benutzerverwaltung die auf die BASIC-Edition aufbaut. Ist für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten geeignet.			
	Version 4, PROFESSIONAL-Edition	•	-	9053-0040
Einlegeboden	inkl. Bodenträgern			
	Edelstahl	•	-	8012-1902
Einlegegitter	für Temperaturbereich -40 °C bis -60 °C, 3 Stück im Set inkl. Bodenträger			
	Edelstahl	•	-	8012-1904
Kryoboxen	Set bestehend aus 36 Karton-Boxen mit Probenteilern	•	-	8012-2369
Netzkabel 5 m	Kaltgeräte-Anschlusskabel C 13 mit britischem Stecker BS 1363	•	-	5023-0285
	Kaltgeräte-Anschlusskabel C 13 mit europäischem Stecker CEE 7/7	•	-	5023-0283
	Kaltgeräte-Anschlusskabel C 13 mit Schweizer Stecker Typ 13	•	-	5023-0284
Neutralreiniger	intensiv, zur schonenden Entfernung von Schmutzresten; Füllmenge 1 kg	•	-	8012-2250
Qualifizierungsunterlagen	IQ/OQ/PQ Dokumente - unterstützende Unterlagen für die kundenseitige Validierung, gemäß Kundenanforderung, Erweiterung des Qualifizierungsordners IQ/OQ um das Kapitel PQ; Parameter: Temperatur, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , - oder Druck, je nach Gerät			
	Digital im PDF Format	•	-	7057-0005
	Gedruckt im Ordner	•	-	7007-0005
	IQ/OQ Dokumente - unterstützende Unterlagen für die kundenseitige Validierung, bestehend aus: IQ/OQ-Checklisten inkl. Kalibrieranleitung und umfangreicher Gerätedokumentation; Parameter: Temperatur, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , Druck, je nach Gerät			
	Digital im PDF Format	•	-	7057-0001
	Gedruckt im Ordner	•	-	7007-0001
Schrankgestell, Aluminium	für 5x4 Standardboxen (50 mm), Maße H 278 x B 139 x T 564 mm			
	3er Set	•	-	8012-2345
	4er Set	•	-	8012-2346

Bezeichnung	Beschreibung	UFV 700	*	Art.-Nr.
	für 5x4 Standardboxen (50 mm) inkl. Boxen, Maße H 278 x B 139 x T 564 mm			
	3er Set	•	-	8012-2347
	4er Set	•	-	8012-2348
	für 6x4 Standardboxen (50 mm), Maße H 334 x B 139 x T 564 mm			
	3er Set	•	-	8012-2357
	4er Set	•	-	8012-2358
	für 6x4 Standardboxen (50 mm) inkl. Boxen, Maße H 334 x B 139 x T 564 mm			
	3er Set	•	-	8012-2359
	4er Set	•	-	8012-2360
	für 5x4 Standardboxen (50 mm), Maße H 278 x B 139 x T 561 mm			
	3er Set	•	-	8012-2349
	4er Set	•	-	8012-2350
	für 5x4 Standardboxen (50 mm) inkl. Boxen, Maße H 278 x B 139 x T 561 mm			
	3er Set	•	-	8012-2351
	4er Set	•	-	8012-2352
Schrankgestell, Edelstahl	für 6x4 Standardboxen (50 mm), Maße H 334 x B 139 x T 561 mm			
	3er Set	•	-	8012-2361
	4er Set	•	-	8012-2362
	für 6x4 Standardboxen (50 mm) inkl. Boxen, Maße H 334 x B 139 x T 561 mm			
	3er Set	•	-	8012-2363
	4er Set	•	-	8012-2364
	für 5x4 Standardboxen (50 mm), Maße H 278 x B 140 x T 562 mm			
	3er Set	•	-	8012-2353
	4er Set	•	-	8012-2354
Schubladen-Schrankgestell, Edelstahl	für 5x4 Standardboxen (50 mm) inkl. Boxen, Maße H 278 x B 140 x T 562 mm			
	3er Set	•	-	8012-2355
	4er Set	•	-	8012-2356
	für 6x4 Standardboxen (50 mm), Maße H 334 x B 140 x T 562 mm			

Bezeichnung	Beschreibung	UFV 700	*	Art.-Nr.
	3er Set	•	-	8012-2365
	4er Set	•	-	8012-2366
	für 6x4 Standardboxen (50 mm) inkl. Boxen, Maße H 334 x B 140 x T 562 mm			
	3er Set	•	-	8012-2367
	4er Set	•	-	8012-2368

## DIENTSTLEISTUNGEN

Bezeichnung	Beschreibung	*	Art.-Nr.
<b>Installationservices</b>			
Geräteeinweisung	Einweisung in Funktionsprinzip und Grundfunktionen des Geräts, Bedienung der Regelelektronik inklusive Programmierung	–	DL10-0700
Inbetriebnahme des Gerätes	Gerät an die kundenseitig vorhandenen Anschlüsse anschließen (Strom, Wasser, Abwasser, Gas), Überprüfung der Grundfunktionen, kurze Einweisung in die Bedienung. (exkl.: auspacken, aufstellen, Reglereinweisung, Programmierung, Installationsarbeiten)	–	DL10-0300
<b>Kalibrierservices</b>			
Kalibrierzertifikat Temperatur	Kalibrierung einer (1) durch den Anwender vorgegebenen Prüftemperatur in Nutzraummitte, inklusive Zertifikat	–	DL30-0190
Räumliche Temperaturmessung 20 Messpunkte	Räumliche Temperaturmessung über 20 Messpunkte, bei einem durch den Anwender vorgegebenen Sollwert, inklusive Zertifikat	–	DL30-0620
<b>Validierservices</b>			
Durchführung der IQ/OQ	Durchführung der IQ/OQ gemäß Qualifizierungsordner	–	DL41-0210
Durchführung der IQ/OQ/PQ	Durchführung der IQ/OQ/PQ gemäß Qualifizierungsordner	–	DL44-0500
<b>Wartungsservices</b>			
Wartung	einmaliger Wartungsservice nach Wartungsplan. Sichtprüfung der mechanischen und elektrischen Komponenten, Prüfung aller wesentlichen Funktionen. Kalibrierung einer durch den Anwender vorgegebenen Prüftemperatur in Nutzraummitte ohne Zertifikat	–	DL20-0603
<b>Wartungsverträge</b>			
Wartungsvertrag BRONZE 3 Jahre	Wartungsservice gemäß Vertrag, Sichtprüfung der mechanischen und elektrischen Komponenten, Überprüfung des Regelverhaltens, 20% Rabatt auf Ersatzteile	–	DL20-0720
Wartungsvertrag GOLD 3 Jahre	Wartungsservice gemäß Vertrag, Sichtprüfung der mechanischen und elektrischen Komponenten, Überprüfung des Regelverhaltens, 20% Rabatt auf Ersatzteile, Prüfung aller wesentlichen Funktionen, Austausch von Verschleissteilen, Kalibrierung einer durch den Anwender vorgegebenen Prüftemperatur in Nutzraummitte, inklusive Zertifikat	–	DL20-0955
Wartungsvertrag SILBER 3 Jahre	Wartungsservice gemäß Vertrag, Sichtprüfung der mechanischen und elektrischen Komponenten, Überprüfung des Regelverhaltens, 20% Rabatt auf Ersatzteile, Prüfung aller wesentlichen Funktionen, Kalibrierung einer durch den Anwender vorgegebenen Prüftemperatur in Nutzraummitte, ohne Zertifikat	–	DL20-0855

**BINDER GmbH**  
Tuttlingen, Germany  
TEL +49 7462 2005 0  
info@binder-world.com  
www.binder-world.com

**BINDER Inc.**  
Bohemia, NY, USA  
TEL +1 631 224 4340  
usa@binder-world.com  
www.binder-world.us

**BINDER Environmental Testing  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.**  
Shanghai, P.R. China  
TEL +86 21 685 808 25  
china@binder-world.com  
www.binder-world.com

**BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.**  
Kowloon, Hong Kong, P.R. China  
TEL +852 39070500  
asia@binder-world.com  
www.binder-world.com