


Model BD 400 | Standard-Étuves bactériologiques à convection naturelle

L'étuve bactériologique BINDER de la série BD à convection naturelle est spécialement conçue pour une utilisation continue et stable à long terme. Elle convient parfaitement à l'incubation délicate des organismes ainsi qu'au conditionnement de matières thermosensibles.

BENEFITS

- Résultats fiables et reproductibles, même avec des débits de lots élevés en utilisation continue
- Routine de désinfection à 100 °C
- Porte intérieure en verre pour une atmosphère stable

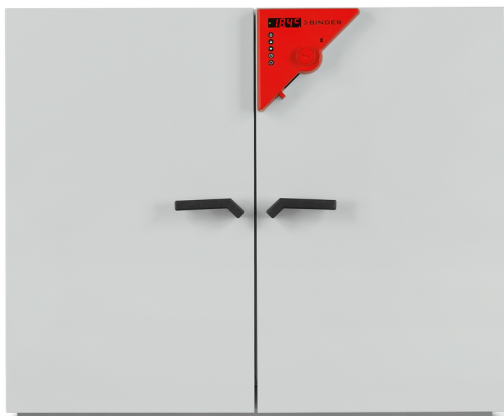

Modèle 400



Modèle 400

IMPORTANT FEATURES

- Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 100 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d'air réglable
- Contrôleur avec fonctions de temporisation
- Porte intérieure en verre de sécurité
- 2 clayettes-grilles chromées
- Appareils jusqu'à 115 l empilables
- Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle
- Interface pour ordinateur : RS 422

ORDERING INFORMATION

| Volume intérieur [l] | NetzanschlussGeraetesicherung (Nennspannung, Gerätesicherung) | Fiche secteur | Version | Désignation catalogue | Référence |
|----------------------|---|---------------|----------|-----------------------|-----------|
| Modèle BD 400 | | | | | |
| 400 | 230 V 1~ 50/60 Hz -12,5 A | CEE 7/7 | Standard | BD400-230V | 9010-0073 |
| | 120 V 1~ 60 Hz -12,5 A | NEMA 5-15 | Standard | BD400UL-120V | 9010-0176 |


TECHNICAL DATA

| Données générales | | |
|--|---|---|
| Désignation catalogue | BD400-230V | BD400UL-120V |
| Référence | 9010-0073 | 9010-0176 |
| Version | Standard | Standard |
| Caractéristiques techniques de la température | | |
| Plage de température | +5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 100 °C | +5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 100 °C |
| Variation de la température dans l'espace à 37°C | 0,5 ± K | 0,5 ± K |
| Variation de la température dans le temps à 37°C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| Temps de chauffage à 37°C | 120 min | 120 min |
| Temps de recouvrement après ouverture des portes pendant 30 s à 37°C | 10 min | 10 min |
| Données électriques | | |
| Tension nominale | 230 V | 120 V |
| Fréquence secteur | 50/60 Hz | 60 Hz |
| Puissance nominale | 0,85 kW | 0,85 kW |
| Fusible | 12,5 A | 12,5 A |
| Phase (tension nominale) | 1~ | 1~ |
| Mesures | | |
| Volume intérieur | 400 l | 400 l |
| Poids de l'appareil net (vide) | 135 kg | 135 kg |
| Poids maximal par étagère | 35 kg | 35 kg |
| Poids total maximal | 90 kg | 90 kg |
| Dégagement arrière | 160 mm | 160 mm |
| Dégagement latéral | 100 mm | 100 mm |
| Dimensions du boîtier sans montages annexes et raccords | | |
| Largeur net | 1.235 mm | 1.235 mm |
| Hauteur net | 1.025 mm | 1.025 mm |
| Profondeur net | 765 mm | 765 mm |
| Dimensions intérieures | | |
| Largeur à l'intérieur | 1.000 mm | 1.000 mm |

| | | |
|---|---------|---------|
| Hauteur à l'intérieur | 800 mm | 800 mm |
| Profondeur l'intérieur | 500 mm | 500 mm |
| Portes extérieures | 2 | 2 |
| Caractéristiques environnementales | | |
| Consommation d'énergie à 37°C | 56 Wh/h | 56 Wh/h |
| Éléments encastrés | | |
| Nombre de clayettes (std./max.) | 2/9 | 2/9 |

Toutes les caractéristiques techniques sont uniquement valables pour les appareils non chargés en version standard, à une température ambiante de 22 ±3 °C et avec une variation de la tension secteur de ±10 %. Les caractéristiques thermiques ont été déterminées d'après la norme d'usine de BINDER et en référence à la norme DIN 12880:2007, en respectant les dégagements recommandés, c'est-à-dire 10 % de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de l'enceinte intérieure. Toutes les indications sont des valeurs moyennes types pour les appareils de série. Sous réserve de modifications techniques.

DIMENSIONS Incl. fittings and connections [mm]

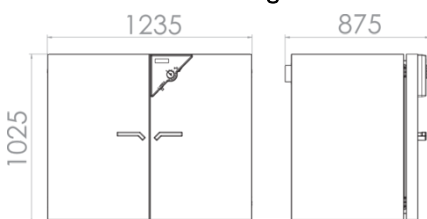

OPTIONS

| Désignation catalogue | Description | BD 400 | * | Référence |
|---|---|--------|----|-----------|
| Certificat de calibrage pour la température | Mesure de la température dans l'espace avec certificat, 9 points de mesure à une température prédéterminée | • | - | 8012-0915 |
| | Mesure de la température dans l'espace avec certificat, 15 à 18 points de mesure à une température prédéterminée | • | - | 8012-0918 |
| | Mesure de la température dans l'espace avec certificat, 27 points de mesure à une température prédéterminée | • | - | 8012-0921 |
| | pour la température, mesure au centre du volume utile à une température prédéterminée | • | - | 8012-1129 |
| Chambre intérieure, renforcée | avec 2 clayettes renforcées | • | - | 8012-1731 |
| Extension du certificat de calibrage | pour la température, pour l'extension de la mesure au centre du volume utile pour une autre température expérimentale | • | - | 8012-1110 |
| Fonction alarme en cas de surcharge thermique | alarme sonore déconnectable, avec valeur limite réglable sur le thermostat de sécurité | | | |
| | Version 120 V | • | - | 8012-0470 |
| | Version 230 V | • | - | 8012-0469 |
| Port d'accès équipé d'un obturateur en silicone | arrière | | | |
| | 10 mm | • | 01 | 8012-0390 |
| | 30 mm | • | 01 | 8012-0397 |

| Désignation catalogue | Description | BD 400 | * | Référence |
|-----------------------------|--|--------|----|-----------|
| | 50 mm | • | 01 | 8012-0399 |
| | au-dessus | | | |
| | 10 mm | • | 01 | 8012-0386 |
| | 30 mm | • | 01 | 8012-0045 |
| | 50 mm | • | 01 | 8012-0049 |
| | 100 mm | • | 01 | 8012-0053 |
| | droite | | | |
| | 10 mm | • | 01 | 8012-0387 |
| | 30 mm | • | 01 | 8012-0046 |
| | 50 mm | • | 01 | 8012-0050 |
| | gauche | | | |
| | 10 mm | • | 01 | 8012-0388 |
| | 30 mm | • | 01 | 8012-0047 |
| | 50 mm | • | 01 | 8012-0051 |
| Serrure de porte | poignée de porte refermable | • | - | 8012-0319 |
| Sonde de température Pt 100 | sonde Pt 100 flexible supplémentaire dans l'enceinte intérieure, équipée d'un raccord externe, avec fiche LEMO (3 pôles) | • | - | 8012-0115 |
| Sortie analogique 4-20 mA | pour les valeurs de température (sortie non modifiable) | • | - | 8012-0432 |

ACCESSORIES

| Désignation catalogue | Description | BD 400 | * | Référence |
|---------------------------------|---|--------|---|-----------|
| APT-COM™ 4 BASIC-Edition | pour des exigences simples concernant l'enregistrement et la documentation avec jusqu'à 5 appareils en réseau. Version 4, édition BASIC | • | - | 9053-0039 |
| APT-COM™ 4 GLP-Edition | pour un travail dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de laboratoire. La documentation des valeurs mesurées est effectuée selon les exigences des directives FDA 21CFR11 de manière protégée contre les manipulations. Version 4, édition BPL | • | - | 9053-0042 |
| APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition | gestion aisée des appareils et utilisateurs basée sur l'Édition BASIC. Convient pour la mise en réseau de 100 appareils. Version 4, édition PROFESSIONAL | • | - | 9053-0040 |

| Désignation catalogue | Description | BD 400 | * | Référence |
|----------------------------|---|--------|---|-----------|
| Chariot à table | chariot à table stable, roulettes avec frein d'arrêt, mesures L 1 300 x P 800 x H 780 mm | • | - | 9051-0019 |
| Clayette-grille | chromé | • | - | 8012-2036 |
| | stainless steel | • | - | 8012-2159 |
| Clayette-plaque perforée | Acier inoxydable | • | - | 8012-2162 |
| Documents de qualification | Documents QI/QO - documents complémentaires pour la validation du client, comprenant les listes de contrôle QI/QO y compris une notice de calibrage et une documentation complète sur l'appareil ; paramètres : température, CO ₂ , O ₂ , pression, en fonction de l'appareil | | | |
| | Imprimés dans un dossier | • | - | 7007-0001 |
| | Numériques au format PDF | • | - | 7057-0001 |
| | Documents QI/QO/QP - documents complémentaires pour la validation du client, selon les besoins du client, extension du dossier de qualification QI/QO avec le chapitre QP ; paramètres : température, CO ₂ , O ₂ ou pression, en fonction de l'appareil | | | |
| | Imprimés dans un dossier | • | - | 7007-0005 |
| | Numériques au format PDF | • | - | 7057-0005 |
| Nettoyant neutre | intensif, pour éliminer délicatement les résidus de saleté ; quantité de remplissage 1 kg | • | - | 8012-2250 |
| Patins en caoutchouc | antidérapants, set pour les pieds de l'appareil | • | - | 8012-2030 |

SERVICES

| Désignation catalogue | Description | * | Référence |
|---|--|---|-----------|
| Contrats de maintenance | | | |
| Contrat de maintenance ARGENT 3 ans | Service de maintenance selon le contrat, contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle du comportement de régulation, 20 % de remise sur les pièces de rechange, contrôle de toutes les fonctions essentielles, calibrage d'une température de test prédéterminée par l'utilisateur au centre de l'espace utile, sans certificat | - | DL20-0810 |
| Contrat de maintenance BRONZE 3 ans | Service de maintenance selon le contrat, contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle du comportement de régulation, 20 % de remise sur les pièces de rechange | - | DL20-0710 |
| Contrat de maintenance OR 3 ans | Service de maintenance selon le contrat, contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle du comportement de régulation, 20 % de remise sur les pièces de rechange, contrôle de toutes les fonctions essentielles, remplacement des pièces d'usure, calibrage d'une température de test prédéterminée par l'utilisateur au centre de l'espace utile, certificat inclus | - | DL20-0910 |
| Service de garantie | | | |
| Extension de garantie 1 an | La garantie est prolongée de 1 an à partir de la date de livraison, hors pièces d'usure | - | DL50-0010 |
| Services de calibrage | | | |
| Certificat de calibrage pour la température | Calibrage d'une (1) température prédéterminée par l'utilisateur au centre du volume utile, certificat inclus | - | DL30-0101 |

| Désignation catalogue | Description | * | Référence |
|--|---|---|-----------|
| | Extension du calibrage d'une (1) température supplémentaire prédéterminée par l'utilisateur au centre du volume utile, certificat inclus | – | DL30-0102 |
| Mesure de la température dans l'espace 9 points de mesure | Mesure de la température dans l'espace via 9 points de mesure à une valeur de consigne prédéterminée par l'utilisateur, certificat inclus | – | DL30-0109 |
| Mesure de la température dans l'espace 18 points de mesure | Mesure de la température dans l'espace via 18 points de mesure à une valeur de consigne prédéterminée par l'utilisateur, certificat inclus | – | DL30-0118 |
| Mesure de la température dans l'espace 27 points de mesure | Mesure de la température dans l'espace via 27 points de mesure à une valeur de consigne prédéterminée par l'utilisateur, certificat inclus | – | DL30-0127 |
| Services de maintenance | | | |
| Maintenance | Service de maintenance unique selon le plan de maintenance. Contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle de toutes les fonctions essentielles. Calibrage d'une température de test prédéterminée par l'utilisateur au centre de l'espace utile, sans certificat | – | DL20-0200 |
| Services de validation | | | |
| Réalisation de la QU/QO | Réalisation de la QU/QO selon le dossier de qualification | – | DL40-0100 |
| Réalisation des QU/QO/QP | Réalisation des QU/QO/QP selon le dossier de qualification | – | DL44-0500 |
| Services d'installation | | | |
| Mise en service de l'appareil | Brancher l'appareil aux raccords existants côté client (électricité, eau, eaux usées, gaz). Contrôle des fonctions de base, brèves instructions de fonctionnement. (Non inclus : déballage, mise en place, instructions régulateur, programmation, travaux d'installation) | – | DL10-0100 |
| Prise en main de l'appareil | Instructions sur le principe de fonctionnement et les fonctions de base de l'appareil, l'utilisation de l'électronique du régulateur, y compris la programmation | – | DL10-0500 |

NOTES

- 01 De la condensation peut se former au niveau du port d'accès.
Un supplément sera facturé pour les positions de ports d'accès spéciales.

BINDER GmbH

Tuttlingen, Allemagne
TÉL. +49 7462 2005 0
FAX +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, NY, États-Unis
TÉL. +1 631 224 4340
FAX +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai, R.P. Chine
TÉL. +86 21 685 808 25
FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, R.P. Chine
TÉL. +852 39070500
FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com