

Zestawy listew oświetleniowych LED



Do modeli serii KB, KT oraz KBF

Zestawy listew oświetleniowych LED są przeznaczone do oświetlania światłem o niewielkim natężeniu wewnątrz urządzeń klimatyzujących firmy BINDER z różnych serii oraz o zróżnicowanych rozmiarach. Są łatwe w montażu i dowolnie ustawialne. Wysokiej klasy moduły LED, emitujące białe światło, są wodoodporne i wtopione w wytrzymałe aluminiowe szyny profilowe. Listwy oświetleniowe są dostępne w trzech odmiennych długościach pod postacią zestawów podstawowych z materiałami mocującymi oraz sterownikiem. Zestaw do rozbudowy umożliwia podłączenie dwóch dodatkowych listew oświetleniowych do sterownika, który jest wyposażony w ściemniacz do regulacji natężenia oświetlenia oraz cyfrowy programator czasowy do sterowania czasami włączania i wyłączenia.

ZESTAW PODSTAWOWY LISTEW OŚWIETLENIOWYCH LED:

- Zestaw podstawowy 300 Nr art. 8012-1107
- Zestaw podstawowy 500 Nr art. 8012-1108
- Zestaw podstawowy 900 Nr art. 8012-1109

Zakres dostawy:

- 2 listwy oświetleniowe LED
- Materiały montażowe:
 - 4 klipsy mocujące ze stali sprężynowej
 - 6 klipsów mocujących z tworzywa sztucznego
 - plastry samoprzylepne tesa Powerstrips®
- Sterownik do maks. 4 listew oświetleniowych LED



Zakres dostawy zestawu podstawowego

ZESTAW DO ROZBUDOWY LISTEW OŚWIETLENIOWYCH LED:

- Zestaw do rozbudowy 300 Nr art. 8012-1716
- Zestaw podstawowy 500 Nr art. 8012-1717
- Zestaw podstawowy 900 Nr art. 8012-1718

Zakres dostawy:

- 2 listwy oświetleniowe LED
- Materiały montażowe:
 - 4 klipsy mocujące ze stali sprężynowej
 - 6 klipsów mocujących z tworzywa sztucznego
 - plastry samoprzylepne



Zakres dostawy zestawu do rozbudowy


PRZYKŁADY MONTAŻU



Listwa oświetleniowa 50 cm, zamocowana do sufitu komory za pomocą plastrów samoprzylepnych tesa POWERSTRIPS®



Listwa oświetleniowa 50 cm, przymocowana do półki drucianej za pomocą klipsów z tworzywa sztucznego

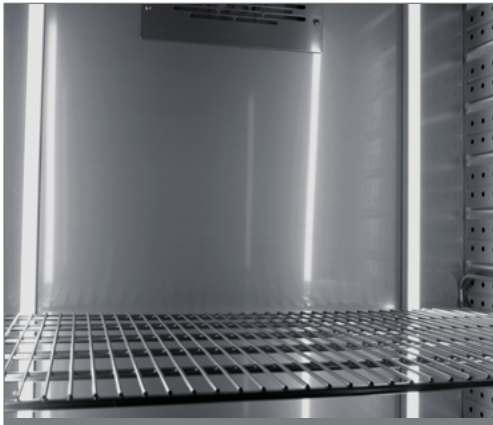

Listwa oświetleniowa 90 cm, zamocowana do tylnej ścianki komory za pomocą plastrów samoprzylepnych tesa Powerstrips®



Listwa oświetleniowa 30 cm, przymocowana do ścianki bocznej komory za pomocą plastrów samoprzylepnych tesa Powerstrips®

PRZEZNACZONE DO KOMÓR SERII KB, KT ORAZ KBF O NASTĘPUJĄCYCH ROZMIARACH

	Model 53	Model 115	Model 170	Model 240	Model 400	Model 720	Model 1020
Zestaw 300 (30 cm)	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw 500 (50 cm)	-	•	•	•	•	•	•
Zestaw 900 (90 cm)	-	-	-	-	•	•	•

DANE TECHNICZNE LISTEW OŚWIETLENIOWYCH

Długość:	30 cm	50 cm	90 cm
Natężenie oświetlenia (odległość: 12 cm):	540 luksów	670 luksów	690 luksów
Barwa światła:	6500 K (światło dzienne, chłodne)		
Zakres temperatur roboczych	-10...60°C		
Stopień ochrony	IP 65		

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA

Napięcie sieciowe	100–240 V
Ściemniacz:	0–100%
Programator czasowy:	cyfrowy, do programu dziennego oraz tygodniowego
Zamocowanie:	magnetyczne do komory