


# Wytrząsarka do inkubatorów CO<sub>2</sub> BINDER

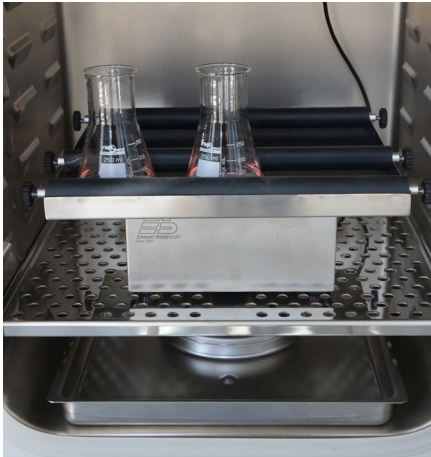

Wytrząsarka w inkubatorze CO<sub>2</sub> BINDER CB 160

CB 170 | CB 260 | CB-S 170 | CB-S 260

Wytrząsarka CO<sub>2</sub> BINDER jest wysokiej jakości nowo zaprojektowanym rozwiązaniem, przeznaczonym do inkubacji hodowanych w zawiesinach komórek w inkubatorach CO<sub>2</sub>. Dzięki zastosowaniu wyłącznie odpornych na korozję elementów w obudowie ze stali nierdzewnej, wytrząsarka CO<sub>2</sub> stanowi idealne rozwiązanie do inkubatorów gazowych z podwyższonymi stężeniami CO<sub>2</sub> oraz niemal nasyconą wilgotnością powietrza. Minimalna ilość oddawanego ciepła, wynosząca zaledwie 4 waty, nie wpływa negatywnie na regulację temperatury inkubatora CB, a optymalna temperatura jest zachowywana w całym wnętrzu. Zewnętrzny sterownik z wyświetlaczem LCD umożliwia komfortową i łatwą obsługę na zewnątrz inkubatora. Wersja „Universal” jest przeznaczona do wszystkich inkubatorów CO<sub>2</sub> bez portu dostępu, natomiast wersja „Professional” jest specjalnie dostosowana do urządzeń serii CB z opcją przepustu elektrycznego. Rozwiązanie to w bezkompromisowy sposób wyklucza możliwość wystąpienia nieszczelności lub kondensacji.

## DANE TECHNICZNE

Ruch wytrząsania:	kołowy w poziomie
Powierzchnia wytrząsarki (mm):	S 375 x G 375
Maks. obciążenie:	2 kg
Prędkość obrotowa:	5–220 obr./min
Przesuw:	20 mm
Czas pracy:	1 s – 100 h lub praca ciągła
Wyświetlacz LCD:	prędkość obrotowa i czas pracy
Dopuszczalne stężenie CO <sub>2</sub> :	do 20%
Dopuszczalna wilgotność:	do 95%, bez kondensacji
Temperatura otoczenia:	4–45°C
Przyłącze elektryczne:	100–240 V, 50/60 Hz
Stopień ochrony:	IP 21
Oddawane ciepło:	maks. 4 W
Wymiary zewnętrzne (mm):	S 375 x G 375 x W 145
Zamocowanie próbek:	3 listwy zaciskowe
Masa:	9,1 kg

## CECHY:

- Niezawodne rozwiązanie, przeznaczone specjalnie do inkubatorów CO<sub>2</sub> BINDER
- Odporne na korozję elementy w obudowie ze stali nierdzewnej
- Nieznaczny poziom oddawanego ciepła
- Zewnętrzny sterownik z wyświetlaczem LCD

### WYTRZĄSARKA „UNIVERSAL”

Wytrząsarka i sterownik połączone za pomocą kabla płaskiego, umożliwiające uniwersalne zastosowanie

Nr art. 8012-1771

### WYTRZĄSARKA „PROFESSIONAL”

Wytrząsarka oraz sterownik wyposażone we wtyczki LEMO, specjalnie do komór BINDER CB z przepustem elektrycznym

Nr art. 8012-1772



► Wszystkie dodatki online [go2binder.com/de-Optionen](http://go2binder.com/de-Optionen)